

General Safety Information

INTENDED USE

Moisture Vue™ On-Demand Moisture Chamber is an eye shield that attaches to ophthalmic frames and functions as a moisture chamber to help maintain eye moisture for young adults and adults who wear eyeglasses.

DIRECTIONS FOR USE

(See Figure on the Right)

- 1) Clean glasses surface with appropriate lens cleaner.
- 2) Remove protective film on device to expose adhesive.
- 3) Affix adhesive side of device to outer edge of glasses frame or outer edge of lenses. Once device is in appropriate position, firmly pressed the device to the glasses.
- 4) Check for gaps. For maximum moisture retention, ensure the seal sits flush against the skin without gaps. Reposition device to your comfort by removing the device from the glasses and reapplying the device if necessary.
- 5) Repeat process on other side of glasses.

STORAGE INSTRUCTIONS

- Place device in the provided storage case in between uses.
- Store chambers in room-temperature, low humidity conditions.
- Avoid leaving chambers in direct sunlight or extreme heat (e.g., car dashboards).
- Keep away from sharp objects that may damage seals.

CLEANING & REUSABILITY INSTRUCTIONS

- Gently wipe the chambers with a dry cloth between uses.
- Avoid getting water, soap, abrasive cleaners, solvents, or alcohol-based solutions on the adhesive surface to maintain longevity.
- This device is a limited use device.
- Replace device once adhesive no longer provides a secure hold and dispose of device in accordance with local recycling regulations.
- This device must be stored between uses as indicated. Inspect for damage and adhesive hold prior to re-use.

CONTRAINDICATIONS

- Non-Sterile: Do not use on broken/irritated skin or if you have an untreated eye infection.
- Not intended for use as industrial safety eyewear or impact protection.
- Do not use if you have known allergies to silicone, adhesives, or frame materials.

WARNINGS

- Do not use while driving, cycling, operating heavy machinery, or performing tasks that require full peripheral vision. This device may restrict peripheral vision or fog unexpectedly.
- Discontinue use immediately if you experience pain, dizziness, allergic reaction, or visual distortion.
- Do not use in environments requiring certified eye protection (e.g., industrial safety, impact hazards) — these chambers are not safety-rated and are not a replacement for certified safety glasses.
- Small part choking risk, keep out of reach of children under 5yr.

Moisture™
Vue
Vue d'humidité Patent Pending

Application Instructions




Step 1
Clean your glasses



Step 2
Expose the adhesive




Step 3
Affix the Moisture Vue™ to your glasses

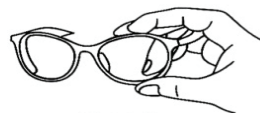

Step 4
Reposition as needed



Step 5
Repeat on the other side

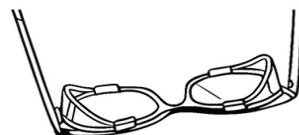

CAUTIONS

- Avoid exposure to extreme heat (e.g., car dashboards, ovens) — silicone and adhesives may warp or degrade.
 - Do not clean with harsh chemicals (acetone, bleach, alcohol) — may damage lenses, coatings, or seals.
 - Do not submerge in water.
- Handle gently when inserting/removing chambers — excessive force may damage the frame, lens, or chamber
- Handle the device with care when inserting or removing the compartments: excessive force could damage the frame, lenses, or compartments.
 - Use the device at your own risk. Briter Eyez accepts no liability for damage caused to the glasses.

PRECAUTIONS

- Ensure a proper fit: the eyewear should be comfortable and must not exert excessive pressure on the face.
- Replace the device regularly to prevent oils or debris from compromising the seal.
- Check the integrity of the adhesive/seal before each use; replace it if it is damaged or peeling.
- Use only as directed: this device is intended to relieve symptoms of dry eyes and maintain eye moisture, not to treat other medical conditions.
- Consult your ophthalmologist before using this product* if you have an eye disease, have undergone recent surgery, or suffer from a chronic condition.
- Remove the eyewear periodically to rest your eyes and prevent skin irritation caused by prolonged contact.

For current patent and trademark information, please visit our website at www.moisturevue.com

For questions, feedback, or to report a complaint, please contact us at support@moisturevue.com

Moisture™
Vue
Vue d'humidité Patent Pending

Informations générales de sécurité

UTILISATION PRÉVUE

La chambre humide à la demande Moisture Vue™ est un dispositif de protection oculaire qui se fixe sur les montures de lunettes et agit comme une chambre humide, aidant ainsi à préserver l'hydratation des yeux chez les jeunes adultes et les adultes qui portent des lunettes.

MODE D'EMPLOI (Voir l'illustration ci-contre)

- 1) Nettoyez la surface des lunettes à l'aide d'un nettoyant pour verres approprié.
- 2) Retirez le film protecteur du dispositif pour exposer la partie adhésive.
- 3) Fixez le côté adhésif du dispositif sur le bord extérieur de la monture ou sur le bord extérieur des verres. Une fois le dispositif bien positionné, appuyez fermement pour le faire adhérer aux lunettes.
- 4) Vérifiez l'absence d'interstices. Pour une rétention d'humidité optimale, assurez-vous que le joint repose bien à plat contre la peau, sans laisser d'espace. Ajustez la position selon votre confort en décollant le dispositif des lunettes et en le repositionnant si nécessaire.
- 5) Répétez le processus de l'autre côté des lunettes.

INSTRUCTIONS DE RANGEMENT

- Placez l'appareil dans l'étui de rangement fourni après chaque utilisation.
- Conservez les chambres à température ambiante et dans un endroit peu humide.
- Évitez d'exposer les chambres à la lumière directe du soleil ou à une chaleur extrême (par exemple, sur le tableau de bord d'une voiture).
- Tenez-les à l'écart des objets tranchants susceptibles d'endommager les joints.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET DE RÉUTILISATION

- Essuyez délicatement les chambres avec un chiffon sec après chaque utilisation.
- Évitez tout contact de la surface adhésive avec de l'eau, du savon, des nettoyants abrasifs, des solvants ou des solutions à base d'alcool afin de préserver sa durée de vie.
- Ce dispositif est destiné à un usage limité.
- Ce dispositif doit être conservé conformément aux instructions après chaque utilisation. Vérifiez l'absence de dommages et l'adhérence avant toute réutilisation.
- Remplacez le dispositif lorsque l'adhésif ne garantit plus une fixation sûre et jetez-le conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.
- Cet appareil doit être rangé entre deux utilisations, conformément aux indications. Vérifiez l'absence de dommages et la tenue de l'adhésif avant de le réutiliser.

CONTRE-INDICATIONS

- Non stérile : ne pas utiliser sur une peau lésée ou irritée, ni en cas d'infection oculaire non traitée.
- Ne pas utiliser comme lunettes de sécurité industrielle ou pour la protection contre les chocs.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie connue au silicone, aux adhésifs ou aux matériaux de la monture.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser en conduisant, en faisant du vélo, en manœuvrant des machines lourdes ou en effectuant des tâches nécessitant une vision périphérique complète. Cet appareil peut restreindre la vision périphérique ou s'embuer de manière inattendue.
- Cesser immédiatement l'utilisation en cas de douleur, de vertiges, de réaction allergique ou de distorsion visuelle.
- Ne pas utiliser dans des environnements nécessitant une protection oculaire certifiée (par exemple, sécurité industrielle, risques d'impact) ; ces chambres ne sont pas approuvées pour la sécurité et ne remplacent pas des lunettes de sécurité certifiées.
- Risque d'étouffement dû aux petites pièces ; tenir hors de portée des enfants de moins de 5 ans.

Moisture™
Vue
Vue d'humidité Patent Pending

Instructions d'application



Étape 1
Nettoyez vos lunettes



Étape 2
Exposez l'adhésif




Étape 3
Fixez le Moisture Vue™ à vos lunettes



Étape 4
Ajustez au besoin



Étape 5
Répétez de l'autre côté

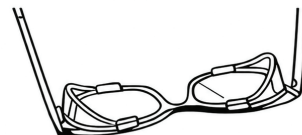

PRÉCAUTIONS

- Évitez l'exposition à une chaleur extrême (par ex. tableaux de bord de voiture, fours) : le silicone et les adhésifs pourraient se déformer ou se détériorer.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques agressifs (acétone, eau de Javel, alcool) : cela risquerait d'endommager les verres, les revêtements ou les joints.
- Ne l'immergez pas dans l'eau.
- Manipulez l'appareil avec précaution lors de l'insertion ou du retrait des compartiments : une force excessive pourrait endommager la monture, les verres ou les compartiments.
- L'utilisation de l'appareil se fait à vos risques et périls. Briter Eyez décline toute responsabilité en cas de dommages causés aux lunettes.

PRÉCAUTIONS

- Assurez-vous d'un bon ajustement : les lunettes doivent être confortables et ne doivent pas exercer de pression excessive sur le visage.
- Remplacez régulièrement le dispositif pour éviter que des corps gras ou des débris n'altèrent l'étanchéité.
- Vérifiez l'intégrité de l'adhésif/du joint avant chaque utilisation ; remplacez-le s'il est dégradé ou se décolle.
- Utilisez uniquement comme indiqué : ce dispositif est destiné à soulager les symptômes de sécheresse oculaire et à maintenir l'hydratation des yeux, et non à traiter d'autres affections médicales.
- Consultez votre ophtalmologiste avant d'utiliser ce produit* si vous souffrez d'une maladie oculaire, avez subi une intervention chirurgicale récente ou souffrez d'une affection chronique.
- Retirez vos lunettes périodiquement pour reposer vos yeux et éviter les irritations cutanées dues à un contact prolongé.

Pour obtenir des informations actualisées sur les brevets et les marques, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.moisturevue.com Pour toute question, tout commentaire ou pour déposer une réclamation, veuillez nous contacter à l'adresse support@moisturevue.com

Moisture™
Vue
Vue d'humidité Patent Pending